






試片電極線性關係及準確度檢測報告

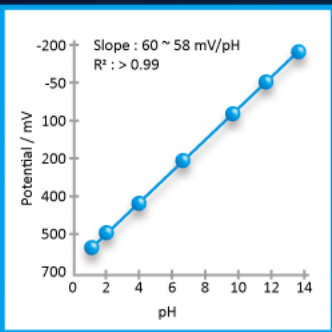

線性關係 (Linearity)

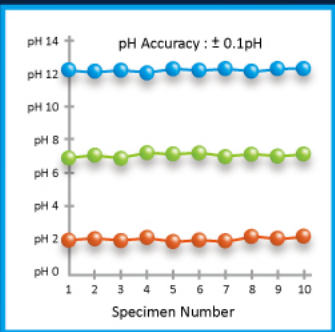

精密度 (Precision)

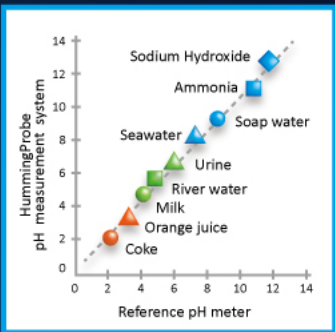

準確度 (Accuracy)



酸鹼試片電極 UH1 / UH2		酸鹼檢測儀 UX100		酸鹼檢測儀 UX200	
量測範圍	pH 0 ~ 14	螢幕	4.3" 彩色LCD觸控螢幕	螢幕	7" 彩色LCD觸控螢幕
誤差	± 0.1 pH	防水防塵等級	IP54	防水防塵等級	IP54
最小檢測體積	UH1 : 10 ~ 20 µL	相機	500萬畫素	相機	500萬畫素
	UH2 : 1 ~ 2 µL	電源	AC 100/240 V, DC 5V 2A	電源	AC 100/240 V, DC 5V 2A
操作溫度	10 ~ 40°C (<10°C 或 >40°C 顯示提示警語)	尺寸 (寬 * 長 * 高)	87 x 152 x 21 mm	尺寸 (寬 * 長 * 高)	129 x 214 x 25 mm
尺寸 (寬 * 長 * 高)	UH1 : 12.6 x 60 x 1 mm	重量	250 g	重量	540 g
	UH2 : 12.6 x 50 x 1 mm	量測範圍		量測範圍	
磁石變頻攪拌器 CS200		pH值	0.00 ~ 14.00 pH	pH值	0.00 ~ 14.00 pH
		電位	± 1000.00 mV	電位	± 1000.00 mV
		溫度	10 ~ 40°C (<10°C 或 >40°C 顯示提示警語)	溫度	10 ~ 40°C (<10°C 或 >40°C 顯示提示警語)
		解析度		解析度	
控溫範圍	25 ~ 40°C	pH值	0.01 pH	pH值	0.01 pH
轉速範圍	400 ~ 1500 rpm	電位	0.1 mV	電位	0.1 mV
適用燒杯體積	10 ~ 500 ml	溫度	0.1°C	溫度	0.1°C
材質	ABS	準確度		準確度	
尺寸 (寬 * 長 * 高)	106 x 165 x 56 mm (含固定架為 260 mm)	pH值	± 0.1 pH	pH值	± 0.1 pH
		電位	0.05%	電位	0.05%
重量	500 g	溫度	± 0.5°C	溫度	± 0.5°C
電源	AC 100/240 V, DC 5V 1.6A	pH chart 曲線圖 (UX200特有)		pH chart 曲線圖 (UX200特有)	
		Time interval 0.1, 0.5, 1, 5, 10 Sec		Time interval 0.1, 0.5, 1, 5, 10 Sec	
		Max runtime 2 hr ~ 280 hr		Max runtime 2 hr ~ 280 hr	



樣品使用量
最少 (1~20µL)

量測酸鹼
免校正

可拋式設計
避免交叉汙染

HUMING PROBE

蜂鳥探針酸鹼檢測系統

商品介紹



UH 1 / UH 2 酸鹼試片電極


① 即開即用免校正



於罐中取出酸鹼測試片



測量方式.1
由檢測片直接吸取樣品後測試

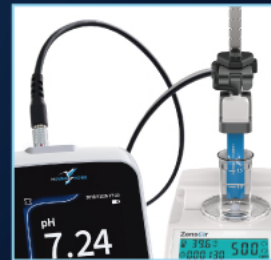


測量方式.2
或將檢測片置入樣品溶液中測試

② 樣品使用量最少 (1~20μL)



UH1: 10~20 μL
專利試紙設計極少樣品即可量測

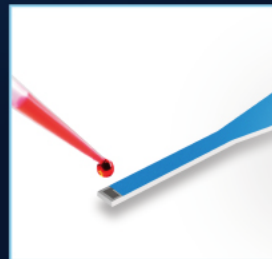

UH2: 1~2 μL



一種樣品，使用一個試片
可避免樣品交叉污染

③ 可拋免交叉汙染



CS 200 磁石變頻攪拌器 (Zensor® 品牌合作)



恆溫控制 (25 ~ 40°C)



轉速數位控制/顯示
(400 ~ 1500rpm)



磁石正反轉設計



燒杯適用大小
(10 ~ 500 mL)



UX 100 酸鹼檢測儀



UX 200 酸鹼檢測儀

彩色觸控屏幕



Cable Socket



Strip Port



500萬畫素鏡頭
可編輯資料



溫度顯示


日期/時間

pH顯示

電位顯示

酸鹼動態色標

功能選單

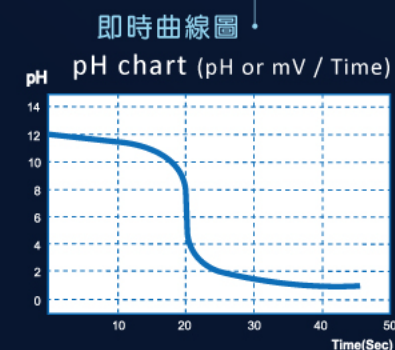

防水防塵等級
IP 54



背面皮革紋
防滑設計



55°三角力學設計
活動立架

